



Pièces de rechange

Harnais CARA
avec attaches
XS: WM 25191
Standard: WM 25192



Harnais CARA Full Face
avec attaches
WM 25243



Jupes du masque CARA
Taille XS: WM 25189
Taille S/M: WM 25238
Taille M/L: WM 25239



Jupes du masque CARA Full Face
Taille S: WM 25601
Taille M: WM 25602
Taille L: WM 25603



Cordon détache-rapide CARA Full Face
WM 25623



Retrouvez notre gamme complète de solutions, interfaces patient et accessoires sur le site www.loewensteinmedical.fr

Caractéristiques techniques

	CARA	CARA Full Face
Classe de produit selon 93 / 42 / CEE	II a	II a
Dimensions (l x h x p)	72 x 112 x 70 mm (Taille XS) 72 x 117 x 70 mm (Taille S/M) 72 x 118 x 70 mm (Taille M/L)	93 mm x 145 mm x 89 mm (Taille S) 95 mm x 160 mm x 90 mm (Taille M) 95 mm x 174 mm x 91 mm (Taille L)
Poids	58 g (Taille XS) 59 g (Taille S/M) 60g (Taille L/M)	93 g (Taille S) 97 g (Taille M) 102 g (Taille L)
Pression thérapeutique	4 hPa – 30 hPa	4 hPa – 25 hPa
Raccord conique selon EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (mâle)	Ø 22 mm (mâle)
Températures limites • Fonctionnement : • Entreposage :	+5 °C à +40 °C -20 °C à +70 °C	+5 °C à +40 °C -20 °C à +70 °C
Résistance à l'écoulement • pour 50 l/min • pour 100 l/min	0,2 hPa 0,9 hPa	0,15 hPa 0,5 hPa
Résistance à l'écoulement de la valve expiratoire d'urgence • Inspiration à 50 l/min • Expiration à 50 l/min	-	0,6 hPa 0,8 hPa
Pression acoustique de la valve expiratoire d'urgence • Ouverture : • Fermeture :	-	0,5 hPa 2,2 hPa
• Ouverture :	18 dB(A) 26 dB(A) 3 dB(A)	19 dB(A) 27 dB(A) 3 dB(A)
• Fermeture :	jusqu'à 12 mois ¹	jusqu'à 12 mois ¹
Normes appliquées	EN ISO 17510-2:2009	EN ISO 17510-2:2009

¹ Les matériaux, utilisés pour la fabrication de masques, s'usent, en particulier quand ils sont nettoyés avec des détergents agressifs. Dans certains cas, il sera donc nécessaire de remplacer plus tôt certaines pièces du masque.

CE 0197

Masque	Taille	Référence
CARA Nasal	XS	WM 25590
CARA Nasal	S/M	WM 25600
CARA Nasal	M/L	WM 25610

Masque	Taille	Référence
CARA Full Face	S	WM 25630
CARA Full Face	M	WM 25640
CARA Full Face	L	WM 25650

Mentions légales

Dénomination : Masque CARA, Masque CARA FF
 Indications : Masque destiné à acheminer le débit d'air (avec ou sans adjonction d'oxygène) de façon non invasive pour le traitement de l'apnée du sommeil ainsi que pour la ventilation non invasive de patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Utilisation à usage multiple par un seul patient à domicile ou par plusieurs patients en milieu médical.
 Classe du dispositif médical : IIa
 Organisme notificateur : TÜV 0197 - Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg - Germany
 Bon usage : Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif
 Remboursement : Pris en charge dans le cadre de prestation de soin à domicile ou en milieu hospitalier : consultez les modalités sur le site www.amel.fr
 Fabricant : LÖWENSTEIN Medical Technology GmbH + Co.KG - Allemagne
 Distributeur : LÖWENSTEIN Médical France

Ce document est destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.

LÖWENSTEIN Médical France
 Z.I. 5 Rue Lavoisier, 91430 Igny
 France
 T : +33 (0)1 69 35 53 20
 F : +33 (0)1 64 54 81 94
 info@loewensteinmedical.fr
www.loewensteinmedical.fr



© Tous droits réservés. Toute reproduction est soumise à autorisation préalable et expresse de la société Löwenstein Medical Technology.



NOUVEAU
 CARA Full Face
 CARA XS

CARA , CARA FF

Vous avez aimé le CARA nasal, sa légèreté, son confort, son silence...
 Vous allez adorer le CARA FF !





CARA, CARA FF

Ajustement, confort, tolérance, expiration agréable et silencieuse : les masques nasaux et bucco-nasaux de la gamme CARA réinterprètent et perfectionnent ces exigences avec modernité.

Modèles de réussite, nos masques CARA séduisent par leur légèreté, l'adaptabilité et la douceur de leur jupe, leurs options de réglage et leurs détails ingénieux.

Les masques de la gamme CARA sont adaptés à quasiment tous les visages.



Mise en place de CARA.



Défaites d'abord les deux attaches du masque.



Enfilez le harnais sur votre tête.



Fixez les deux attaches du harnais au masque.



Ajustez les bandes auto-agrippantes supérieures en évitant qu'elles ne soient trop serrées.



Ajustez ensuite les bandes auto-agrippantes inférieures en évitant qu'elles ne soient trop serrées.



Ajustez le harnais sur le dessus de la tête de manière à ce que les bandes inférieures ne touchent pas les lobes de vos oreilles.



Ne serrez pas trop la cale frontale, elle ne doit pas toucher le front.



Vous trouverez notre vidéo utilisateur sur YouTube.

Jupe ajustée qui ne glisse pas

La première impression ne trompe pas. La jupe est douce, souple et adhère parfaitement. Elle ne glisse pas et épouse parfaitement les contours du visage. Le masque assure ainsi un confort longue durée, même sans coussinet frontal.

Perfectionnons le meilleur pour faire place au silence

La fuite intentionnelle pratiquée sous la forme d'une fente à côté de la rotule est une solution éprouvée depuis des décennies. La gamme CARA perfectionne encore cette spécificité. La réduction du nombre de pièces utilisées facilite la manipulation, allège le masque et préserve l'environnement en limitant la production de matériel et son élimination.

L'évacuation de l'air reste diffuse pour ne déranger ni le patient ni son conjoint, et la partie supérieure est toujours fermée pour éviter que le flux d'air n'atteigne les yeux.

CARA : exemplaire à plusieurs titres

Le masque CARA ne séduit pas seulement les utilisateurs. Il a décroché le prix international de design Focus Open et la certification OEKO-TEX STANDARD 100 pour son harnais. Seuls les textiles irréprochables ne présentant aucune substance nocive pour la santé peuvent bénéficier de cette certification, reconnue dans le monde entier.




Focus Open 2016
Special Mention

BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD



Les avantages de CARA

- Jupe très souple, disponible en 3 tailles
- Fuite intentionnelle diffuse et silencieuse **1a**, **1b**
- Poids plume **2**
- Harnais doté d'un code couleur – partie supérieure colorée (bleu pétrole ou bordeaux)
- Réglage des attaches supérieures du harnais pour un ajustement à chaque taille de tête **3**
- Choix entre les fentes latérales et la version fixe **4a**, **4b**
- Cordon détache-rapide pour une ouverture facile **5**
- Rotule articulée à 360° pour une meilleure liberté de mouvement **6**
- Matériaux très robustes

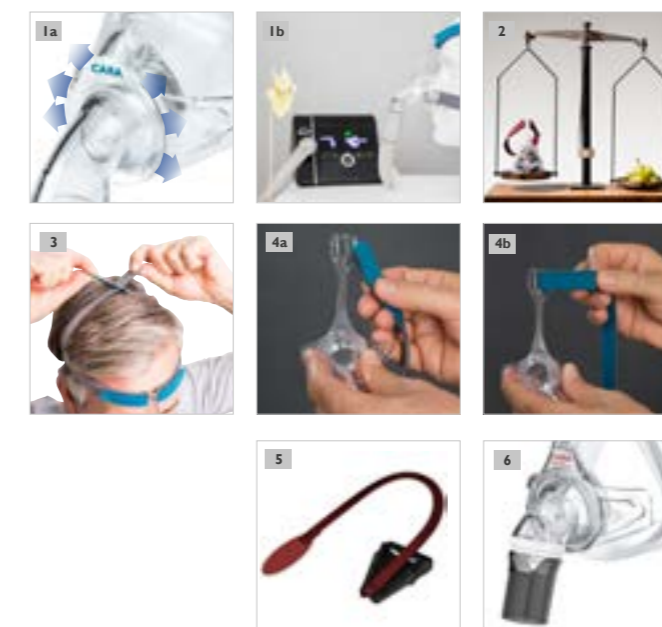

CARA - Made in Germany