

Zubehör

**Set Kugelgelenk vented Nasal**  
Sicherungsring, Winkel, Drehhülse  
WM 15798



**Set Kugelgelenk Full Face vented (JOYCEeasy next FF)**  
Sicherungsring, Winkel, Drehhülse, Notfallausatemventil  
WM 15944



**Set Kugelgelenk Full Face vented (JOYCEeasy Full Face)**  
Sicherungsring, Winkel, Drehhülse, Notfallausatemventil  
WM 15897



**Reißleine WM 26890 (Full Face)**



**Set Endoskopieadapter JOYCEeasy next FF NV / JOYCEeasy Full Face NV**  
Sicherungsring NV, Endoskopie-Winkel NV  
WM 15864



**Set Winkel JOYCEeasy next FF NV / JOYCEeasy Full Face NV**  
Sicherungsring NV, Winkel NV  
WM 25275



Ersatzteile

**WEINMANNStrap für JOYCEeasy nasal**  
inkl. Bänderungsclips  
WM 25505



**WEINMANNStrap für JOYCEeasy Full Face**  
inkl. Bänderungsclips  
WM 25606



**WEINMANNStrap für JOYCEeasy next FF**  
inkl. Bänderungsclips  
WM 25105



**Maskenkissen Silikon**  
Gr. S WM 26803 (Nasal)  
WM 26853 (Full Face)  
WM 25104 (next FF)  
Gr. M WM 26813 (Nasal)  
WM 26863 (Full Face)  
WM 25114 (next FF)  
Gr. L WM 26823 (Nasal)  
WM 26873 (Full Face)  
WM 25124 (next FF)



**Stirnpolster Silikon**  
WM 26801 (Nasal und Full Face)



Technische Daten

	JOYCEeasy next FF / JOYCEeasy Full Face	JOYCEeasy nasal
Produktklasse nach Richtlinie 93 / 42 / EWG	II a	II a
Abmessungen (B x H x T)	108 x 142 x 102 mm (Größe S) 110 x 156 x 104 mm (Größe M) 114 x 168 x 104 mm (Größe L)	100 mm x 100 mm x 80 mm (Größe S) 105 mm x 110 mm x 80 mm (Größe M) 110 mm x 120 mm x 80 mm (Größe L)
Gewicht	113 g (Größe S) 119 g (Größe M) 126 g (Größe L)	94 g (Größe S) 97 g (Größe M) 98 g (Größe L)
Totraumvolumen	270 ml	100 ml (Größe S) 105 ml (Größe M) 115 ml (Größe L)
Therapie-Druck	4 hPa – 30 hPa (JOYCEeasy Full Face) 4 hPa – 40 hPa (JOYCEeasy next FF)	4 hPa – 25 hPa
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)	Ø 22 mm (männl.)
Druckmessanschluss	Ø 4 mm	–
Temperaturbereich		
• Betrieb:	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C
• Lagerung:	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Strömungswiderstand		
• bei 50 l/min	–	0,3 hPa
• bei 100 l/min	–	1,0 hPa
Strömungswiderstand vented		
• bei 50 l/min	0,2 hPa	–
• bei 100 l/min	0,7 hPa	–
Strömungswiderstand non vented		
• bei 50 l/min	0,03 hPa	–
• bei 100 l/min	0,1 hPa	–
Strömungswiderstand Notfallausatemventil (nur vented)		
• Inspiration bei 50 l/min	0,9 hPa	–
• Expiration bei 50 l/min	0,6 hPa	–
Schalt-Druck Notfallausatemventil		
• Öffnen:	1 hPa	–
• Schließen:	2 hPa	–
Angebener Zweizahl-Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871:		
• Schalldruckpegel:	19 dB(A)	16 dB(A)
• Schallleistungspegel:	27 dB(A)	24 dB(A)
• Unsicherheitsfaktor:	3 dB(A)	3 dB(A)
Gebrauchsdauer	bis zu 12 Monate <sup>1</sup>	bis zu 12 Monate <sup>1</sup>
Angewandte Normen	EN ISO 17510-2:2009	EN ISO 17510-2:2009

<sup>1</sup> Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, Maskenteile früher zu ersetzen.

CE 0197

© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical Technology. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr. p101054e2001



JOYCEeasy  
Genial einfach. Einfach genial.

Produktbezeichnung	Gr. S	Gr. M	Gr. L	HMV-Pos.Nr.
JOYCEeasy Nasal	WM 25510	WM 25520	WM 25530	14.24.16.2045
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930	14.24.16.6039
JOYCEeasy next FF	WM 25109	WM 25119	WM 25129	14.24.16.6055
JOYCEeasy next FF NV	WM 25159	WM 25169	WM 25179	14.24.16.1026

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter [loewensteinmedical.de](http://loewensteinmedical.de)

Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburg  
Deutschland  
T : +49 40 547 02 0  
F : +49 40 547 02 461  
info@loewensteinmedical.de  
www.loewensteinmedical.de








JOYCEeasy next FF

JOYCEeasy Full Face

JOYCEeasy nasal

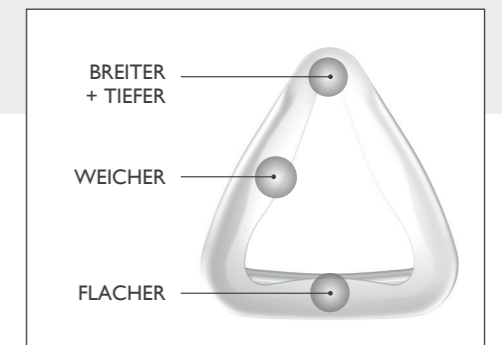

# JOYCEeasy

... geniale Einfachheit.  
Nasal oder Full Face. Einfach easy.

Einfacher geht's wirklich nicht: Alles an unseren Beatmungsmasken JOYCEeasy zielt auf eine kinderleichte Bedienung ab; so die einfache Maskeneinstellung direkt am Patienten und die intuitive Handhabung. Gleichzeitig sorgt JOYCEeasy sofort für mehr Therapie-Compliance, denn Leckagen und Druckstellen sind dank ihrer guten Passform auf ein Minimum reduziert. Das leise und diffuse Ausatemsystem sorgt zudem für eine ruhige Schlafzimmerschlafatmosphäre.

Geniale Einfachheit überall:

- Grenzenlose Bewegungsfreiheit dank des Kugelgelenks 1
- Leises und diffuses Ausatemsystem 2
- Mit einer Hand auf- und abzusetzen
- Farbcodierte Klettungen 3
- Extrem robuster Kunststoff
- Reißleine (nur Full Face)

## JOYCEeasy next FF JOYCEeasy Full Face

... das perfekte Duo.  
Für jeden die richtige Passform.

Wir haben Ihnen zugehört.

Und JOYCEeasy Full Face entsprechend Ihren praktischen Bedürfnissen überarbeitet:


JOYCEeasy next FF mit rundum überarbeitetem, größerem Maskenkissen, der auch bei höheren Drücken komfortabel und stabil aufliegt.

Sowie einer Kopfbänderung, die ebenfalls druckstabil anliegt und deren Clip sich durch den richtigen Mix aus Materialien und ergonomischem Design leicht von der Maske lösen lässt.

Ihr Nutzen – Für jedes Gesicht die richtige Maske:

JOYCEeasy next FF = normal bis adipös

JOYCEeasy Full Face = schlank bis hager

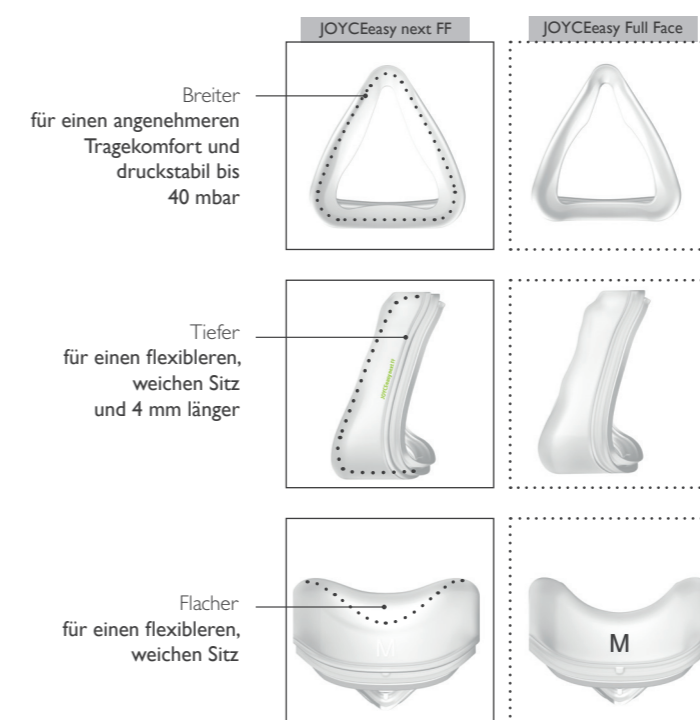

## JOYCEeasy nasal

Auch die Nasalmaske wurde dank Ihrer Rückmeldungen weiter optimiert.

Ein breiter, weicher und tiefer Nasenrückenbereich lässt auch größere Nasen leicht und angenehm in das Kissen abtauchen. Durch einen flacheren und flexiblen Oberlippenbereich schmiegt sich die Maske noch sanfter an das Gesicht an.

Dank einer Vergrößerung des Maskenkissens können von diesen Verbesserungen nun noch mehr Patienten profitieren.

Keine Sorge, das in der Größe unveränderte Kissen in Größe S passt auch weiterhin auf kleine Gesichter.